


MIDAS REX™ MR7

PRÓXIMA GENERACIÓN DE MOTORES
NEUMÁTICOS DE ALTA VELOCIDAD

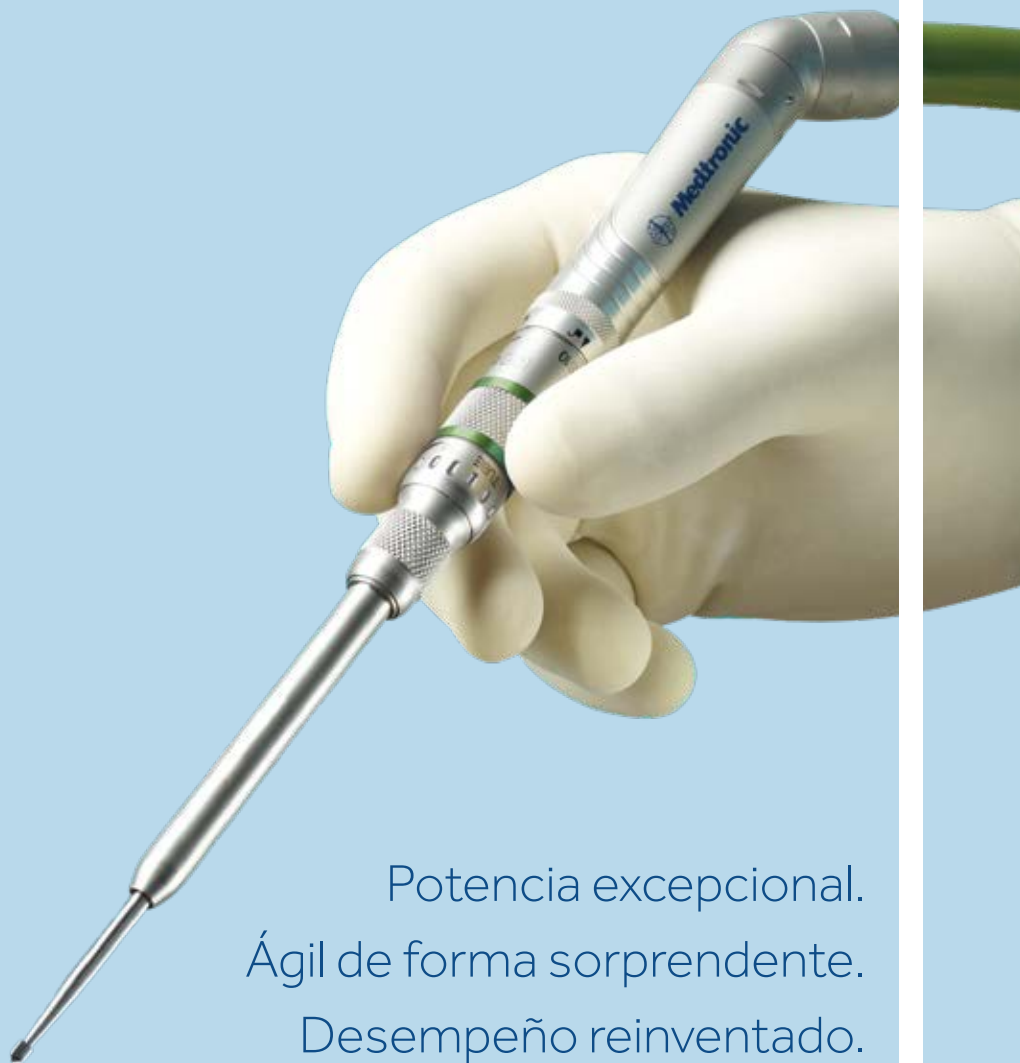

Potencia excepcional.
Ágil de forma sorprendente.
Desempeño reinventado.

Medtronic
Juntos, Más Lejos

Sistema Midas Rex™ MR7

Cuarenta años más tarde, aún creemos en la innovación y aprendizaje continuos a partir de la experiencia. Los Motores Neumáticos de Alta Velocidad MR7 y MR7 Touch de Midas Rex™ entregan la potencia y el desempeño dinámicos que usted espera, y mucho más. Con la tecnología innovadora de nuestra marca insigna, se proyecta y fabrica cuidadosamente cada componente para la máxima potencia y durabilidad extrema.



Tecnología de Desempeño Dinámico

- Tecnología patentada diseñada para entregar desempeño eficiente
- Diseñado con precisión y fabricado para calidad y durabilidad
- Sistema innovador de lubricación para entrega consistente de aceite en cada cirugía

Potencia Excepcional

- Entrega más torque y potencia cuando usted más los necesita

Midas Rex® MR7

- 20% más potencia y torque que el Midas Rex™ Legend Gold™*
- 72,000 rpm a 120 psi/8 bar

Midas Rex® MR7 Touch

- 10% más potencia y 14% más torque que el Midas Rex™ Legend Gold Touch™**
- 70,000 rpm a 120 psi/8 bar

Midas Rex® tiene 40 años de liderazgo e innovación en motores neumáticos de alta velocidad.

*En comparación con el Sistema Legend Gold™ de Midas Rex™

**En comparación con el Legend Gold™ Touch de Midas Rex™

E Ñ O R E I N V E N T A D O S



Control en la punta de sus dedos

- Control en la punta de sus dedos de Midas Rex™ presenta la misma tecnología de desempeño con el control de activación con el dedo
- Palanca de extensión ajustable diseñada ergonómicamente
- Ajuste variable de la extensión del control de dedo

Plataforma Estandarizada

- Usa las herramientas de disección y accesorios de Legend™
- Línea de producto comprensiva para atender a sus necesidades

Agilidad Sorprendente

- Manguera más pequeña y más ligera para fácil maniobra y manejo en el quirófano
- Mejoras ergonómicas en general para un uso más confortable

Control de Pedal Amigable

- Diseño de pedal abierto para fácil acceso y reposicionamiento
- El protector automático del puerto ayuda a proteger el puerto cuando el motor no está en uso
- Compatible con los motores Midas Rex™ Legend Gold™, Legend Gold Touch™, y Legend Platinum™
- Fácil de instalar, mantener y limpiar



Potencia y Desempeño con el que Usted Puede Contar

Midas Rex™ MR7

Información de Compras

Cant.

PM700	• Motor MR7 Midas Rex™	1
PM710	• Motor de Toque MR7 Midas Rex™	1
PA700	• Lubricador / Difusor Desechable	1
PC700	• Control de Pedal	1
PC710	• Manguera Reguladora	1
PC720	• Adaptador Triton™	1
PA600	• Estuche del Instrumento	1
	Piezas Repuestas	
	PA615 - Tapa,	
	PA620 - Bandeja,	
	PA625 - Alfombrilla de Bandeja	



Molino de Hueso Neumático Legend™

- Método controlado y con precisión de cortar en trozos el hueso
- Produce tamaños de partículas homogéneas
- Maximiza el rendimiento del hueso procesado
- Funciona con autoinjerto y aloinjerto
- Permite la adición de aditivos óseos durante el procesamiento
- Sin engranajes o cuchillas cortantes lo que facilita la limpieza y reinstalación
- Base reutilizable que se puede esterilizar en autoclave. Contenedor plástico desechable.

Accesorios del Sistema Legend™

PA120	• Boquilla de Limpieza para accesorio de Legend™
PA130	• Llave Inglesa para Motor Legend™
PA200	• Regulador Legend (conexión DISS)
PA300	• Cepillo de Limpieza Legend™ de 1.2 mm (1/32")
PA310	• Cepillo de Limpieza Legend™ de 2.4 mm (3/32")
PA320	• Cepillo de Limpieza Legend™ de 3.2 mm (1/8")
PA305	• Cepillo de Limpieza Legend™ de 1.2 mm (5pk)
PA315	• Cepillo de Limpieza Legend™ de 2.4mm (5pk)
PA325	• Cepillo de Limpieza Legend™ de 3.2mm (5pk)
PA115	• Caja de esterilización para el sistema MR7 Legend™
PC110	• Legend™ FN2-DISS a M-Schr
PC120	• Legend™ FN2-DISS a MA-DISS
PC130	• Conector WF4 Legend™
PC140	• Legend™ FN2-DISS a F-Schr

Información de Compras

Cant.

BM100	• Molino de Hueso Neumático Legend™	1
BM200	• Contenedor y Espátula de plástico Desechables	1

Para más información, póngase en contacto con su representante de ventas de Medtronic o consulte al portal www.medtronic.com
Consulte el manual de instrucción para las instrucciones, advertencias, precauciones y contraindicaciones.

Medtronic

Medtronic Andean
Av. Calle 116 #7-15
Oficina 1101,
Torre Cusezar
Bogotá, Colombia
Tel: +57 1 7427300

Medtronic South Atlantic
Vedia 3616, 2° Piso,
C1430DAH
Buenos Aires, Argentina
Tel: +54 (11) 5789 8500

Medtronic South Pacific
Rosario Norte 532, Piso 12
Las Condes, Región
Metropolitana
Santiago, Chile
Tel: +56 2258 14993

Medtronic Caricam
Local 1 Rd# 869,
Km 2.0 Bo. Palmas
Cataño, 00962,
Puerto Rico
Tel: + 1 787 294 3540

Medtronic en México
Av. Insurgentes Sur 863, Piso
15 y 16
Benito Juárez, Nápoles,
03810, Ciudad de México
Teléfono: 01 55 1102 9030